


Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen

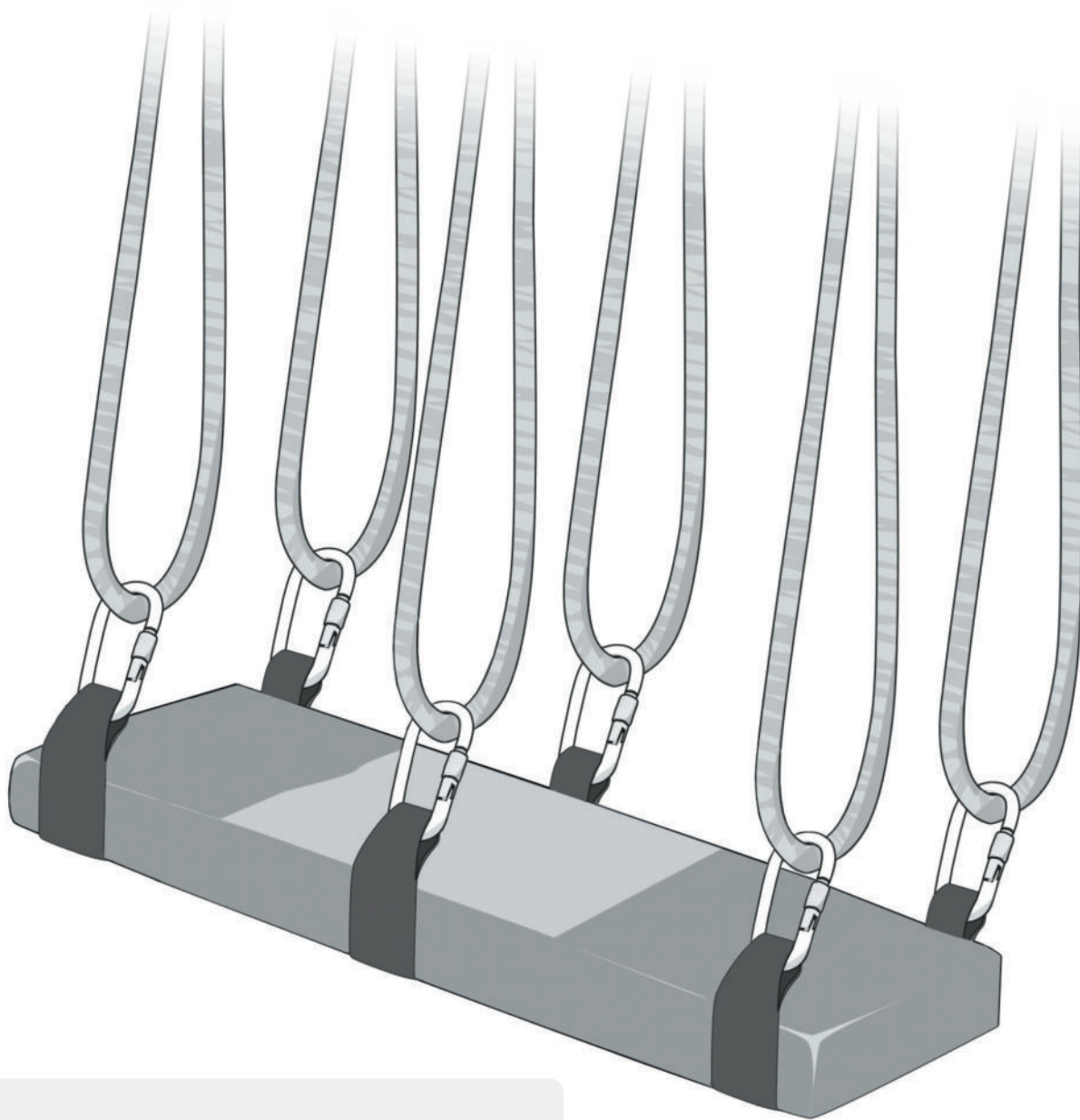

Doppelschaukel

Maximallast: 100 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG GmbH & Co. KG

🏠 Gernotstr. 17 - 44319 Dortmund

☎ +49 (0)231 91 28 156


📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

Karabiner separat erhältlich
Art.-Nr.: 113105 / 113106

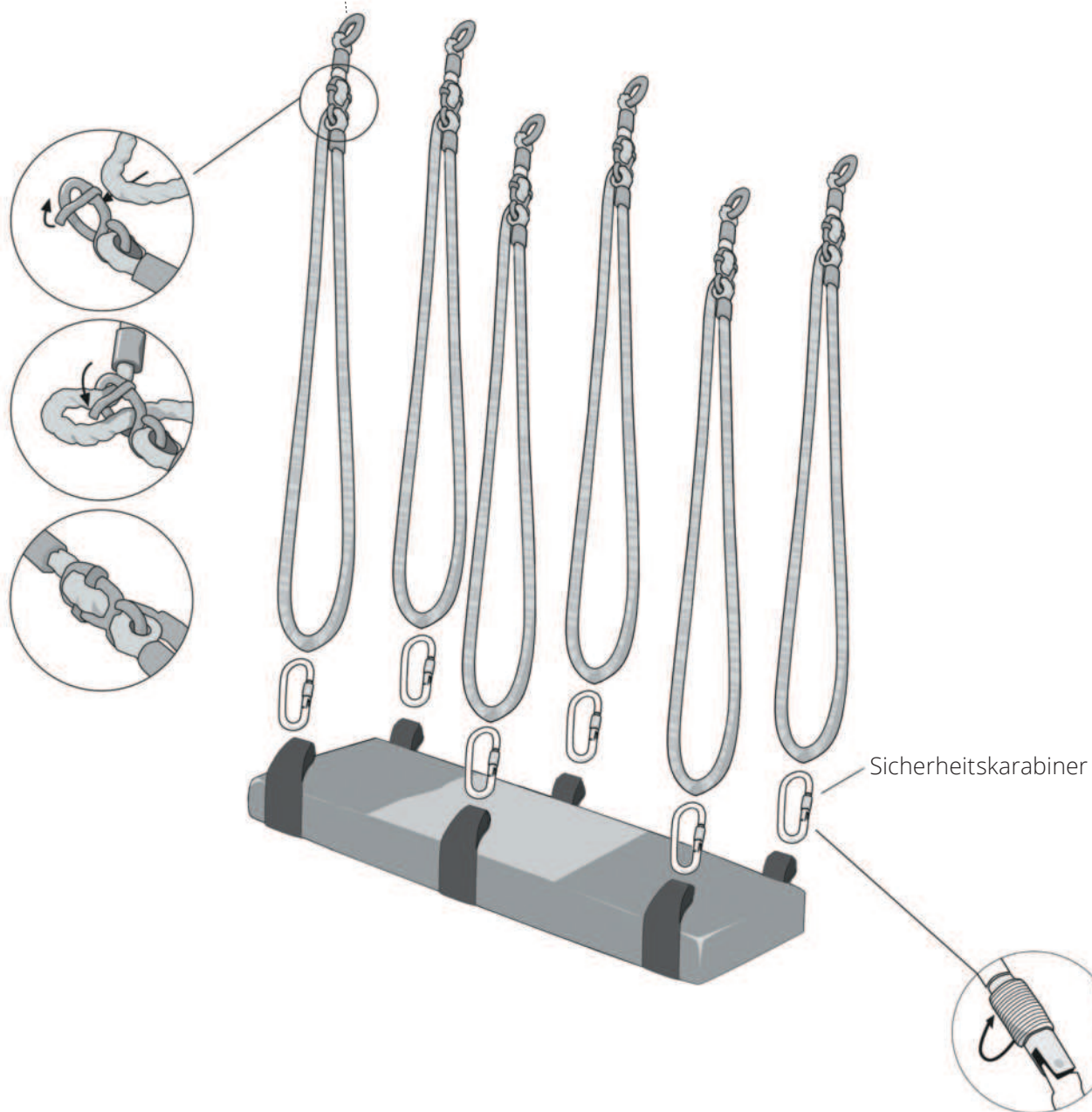

Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers!
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

Herstellerinformation Doppelschaukel

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 117030

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	100 kg
Größe	ca. 25 x 100 cm
Eigengewicht	ca. 4 kg ohne Zubehör
Material	Cordura, Polypropylengurtband, Multiplexplatte mit Schaumstoff gepolstert
Zubehör	inkl. 6 höhenverstellbare Aufhängeseile (je 2,5 m) und 6 Sicherheitskarabiner

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Die Doppelschaukel kann an einem Deckenaufhängungssystem an **sechs, vier, zwei** oder **einem** Punkte aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

Beurteilungskriterien:


- Unverzichtbar für z.B. Gleichgewichtsübungen, Tonusregulation, Arbeit mit Schwerkraft
- Aktivierung der Aufrichtereaktion
- Stimulation der extraokularen Muskulatur u.v.m.
- Einsetzbar in Ergotherapie und Psychomotorik
- Für die Behandlung von Kindern, speziell im U3-Bereich

Pflege und Reinigung:

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel! Matten sind nur in Turnschuhen oder Socken zu betreten.

Anwendungsbeispiele


1. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 4-Punkt-Aufhängung

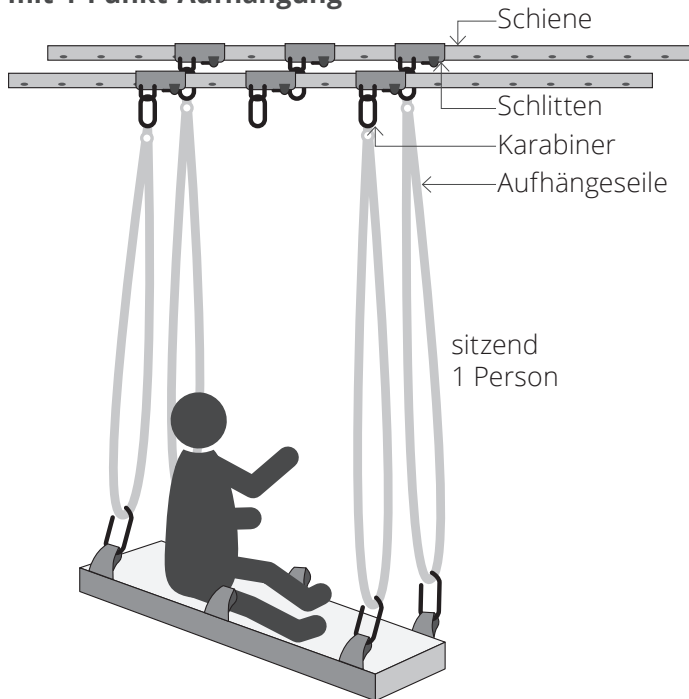

2. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 4-Punkt-Aufhängung



3. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 2-Punkt-Aufhängung

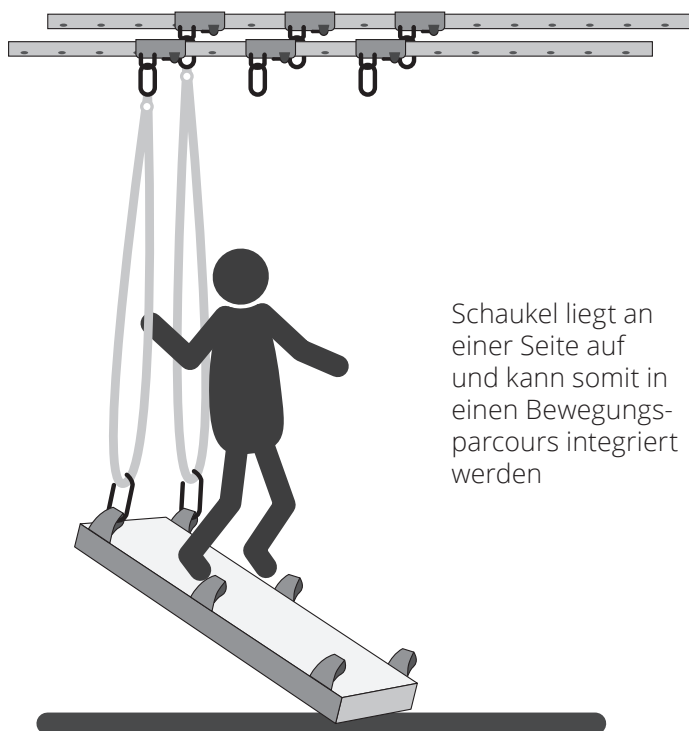

4. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 6-Punkt-Aufhängung

